

# STIMULAN<sup>®</sup>

## GUÍA DE PREPARACIÓN DE STIMULAN Rapid Cure

### Solución de mezcla proporcionada

Debe utilizar la solución de mezcla que se proporciona en el kit. No añada ningún otro líquido.

1



Vacíe **STIMULAN** Rapid Cure en polvo en el recipiente de mezcla estéril provisto

2



Añada la solución de mezcla y mezcle cuidadosamente hasta obtener una pasta suave (aproximadamente 30 segundos)

3



Aplique la mezcla en el molde inmediatamente



Deje la pasta reposar por lo menos 8 minutos desde la mezcla. Doble el molde para sacar las perlas

**Advertencia:** el uso simultáneo de antibióticos suministrados localmente podría afectar al tiempo de fraguado como se demuestra a continuación en 10cc de **STIMULAN** Rapid Cure. El mezclado de antibióticos con el dispositivo **STIMULAN** Kit / **STIMULAN** Rapid Cure es una práctica considerada fuera de indicación a las especificaciones del medicamento (off-label en inglés). Realizar esta práctica corre por cuenta y riesgo del cirujano / profesional sanitario.

### Mezcla de antibióticos en polvo y líquidos

Cuando se utilicen antibióticos líquidos, la solución de mezcla proporcionada en el kit no debe utilizarse.

Vancomicina\* (en polvo) 1g y gentamicina\* (líquida) 240mg

NO UTILICE LA SOLUCIÓN DE MEZCLA PROPORCIONADA




1g vancomicina en polvo

1



Añada vancomicina en polvo a **STIMULAN** Rapid Cure en polvo y prosiga con su mezclado

3

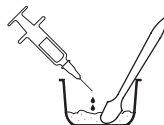

Añada los 6ml de gentamicina líquida a los polvos ya mezclados de **STIMULAN** Rapid Cure y vancomicina y mezcle durante 30 segundos

4



Aplique la mezcla en el molde inmediatamente



Tiempo de fraguado de 3 a 5 minutos



3 ampollas de 80mg de gentamicina líquida (6ml)

2



Introduzca 6ml de gentamicina líquida en una jeringuilla

Vancomicina\* (en polvo) 1g y tobramicina\* (líquida) 240mg

NO UTILICE LA SOLUCIÓN DE MEZCLA PROPORCIONADA




1g vancomicina en polvo

1



Añada vancomicina en polvo a **STIMULAN** Rapid Cure en polvo y prosiga con su mezclado

3

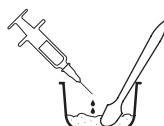

Añada los 6ml de tobramicina líquida a los polvos ya mezclados de **STIMULAN** Rapid Cure y vancomicina y mezcle durante 30 segundos

4



Aplique la mezcla en el molde inmediatamente



Tiempo de fraguado de 4 a 7 minutos



3 ampollas de 80mg de tobramicina líquida (6ml)

2



Introduzca 6ml de tobramicina líquida en una jeringuilla

## Antibióticos en polvo

Debe utilizar la solución de mezcla que se proporciona en el kit. No añada ningún otro líquido.

### Vancomicina \* (en polvo) 1g



## Antibióticos en polvo con tiempos de fraguado prolongados

Algunos antibióticos podrían prolongar el tiempo de fraguado de manera considerable. La siguiente técnica garantiza un tiempo de fraguado más rápido.

### Tobramicina \* (en polvo) 1.2g



## Antibióticos líquidos

Cuando se usen antibióticos líquidos, la solución de mezcla proporcionada en el kit no debe utilizarse.

### Gentamicina\* (líquida) 240mg NO UTILIZE LA SOLUCIÓN DE MEZCLA PROPORCIONADA



### Tobramicina\* (líquida) 240mg NO UTILIZE LA SOLUCIÓN DE MEZCLA PROPORCIONADA



CE 0088

\*Fuente: Hospira

Es responsabilidad del especialista decidir el tipo y la cantidad de antibiótico empleado.

Este catálogo puede contener el uso de STIMULAN o técnicas que van más allá de la autorización / aprobación actual concedida por la autoridad reguladora competente. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local.

©2017, Biocomposites y STIMULAN son marcas registradas de Biocomposites Ltd. Todos los derechos reservados. No está autorizada la copia, reproducción, distribución o reedición sin el permiso expreso y por escrito del propietario, Biocomposites Ltd.

Patentes concedidas: GB2367552, EP I204599 B1, US 6780391, EP 2594231 B1, US 8883063, CN ZL201210466117 X, GB2496710 / Patentes pendientes: GB1502655.2, EP I6154210.5, US I5/040075, CN 201610089710.5, US I5/288328.

MAOI95RI No está autorizada su distribución en EE.UU.