

## Dosis recomendada cada 10 cc

El médico a cargo del tratamiento tiene la última palabra en cuanto al tipo y cantidad de antibiótico

### Antibióticos en polvo

**PRECAUCIÓN:** Solamente se debe usar la solución de mezcla incluida en el paquete. No agregar ningún otro líquido

#### Vancomicina (en polvo) 1.000 mg



1.000 mg  
Vancomicina en polvo

1



Agregar **vancomicina** en polvo al **Stimulan Rapid Cure** polvo y mezclar

2



Agregar la solución de mezcla del **Stimulan Rapid Cure** y mezclar por 30 segundos

3



Colocar la mezcla el molde de perlas inmediatamente



Se solidifica de 3 a 5 minutos

### Antibióticos en polvo con tiempos de solidificación prolongados

**PRECAUCIÓN:** algunos antibióticos pueden tener tiempos de solidificación muy prolongados. La técnica de premezclado que se describe a continuación permite acelerar el tiempo de solidificación

#### Tobramicina (en polvo) 1.000 mg



1.000 mg  
Tobramicina en polvo

1



Agregar la solución de mezcla y el polvo de **Stimulan Rapid Cure**. Mezclar por 40 segundos

2



Agregar **tobramicina** en polvo al **Stimulan Rapid Cure** y mezclar por 30 segundos

3



Colocar la mezcla el molde de perlas inmediatamente



Se solidifica de 10 a 20 minutos

#### Daptomicina (en polvo) 1.000 mg **NO USAR SOLUCIÓN DE MEZCLA, SINO SOLUCIÓN SALINA PARA INYECCIÓN**



1.000 mg  
Daptomicina en polvo

1



Agregar 6 ml de solución salina estéril al polvo **Stimulan Rapid Cure**. Mezclar por 40 segundos

2



Agregar daptomicina en polvo a la mezcla de **Stimulan Rapid Cure** y mezclar por 30 segundos

3



Colocar la mezcla el molde de perlas inmediatamente



Se solidifica de 15 a 30 minutos

### Antibióticos líquidos

**PRECAUCIÓN:** cuando se usan antibióticos líquidos, no se debe usar la solución de mezcla suministrado en el paquete y se debe descartar

#### Gentamicina (líquida) 240 mg **NO USAR LA SOLUCIÓN DE MEZCLA**



Ampollas de 3 x 80 mg  
Gentamicina líquida (6 ml)

1



Traspasar 6 ml de **gentamicina** líquida a una jeringa

2



Agregar 6 ml de **gentamicina** líquida al polvo de **Stimulan Rapid Cure** y mezclar por 30 segundos

3



Colocar la mezcla el molde de perlas inmediatamente



Se solidifica de 3 a 5 minutos

#### Tobramicina (líquida) 240 mg **NO USAR LA SOLUCIÓN DE MEZCLA**



Ampollas de 3 x 80 mg  
Tobramicina líquida (6 ml)

1



Traspasar 6 ml de **tobramicina** líquida a una jeringa

2



Agregar 6 ml de **tobramicina** líquida al polvo **Stimulan Rapid Cure** y mezclar por 30 segundos

3



Colocar la mezcla el molde de perlas inmediatamente



Se Solidifica de 5 a 15 minutos

## Dosis recomendada cada 10 cc

El médico a cargo del tratamiento tiene la última palabra en cuanto al tipo y cantidad de antibiótico


### Combinación de antibióticos líquidos y en polvo

**PRECAUCIÓN:** cuando se usan antibióticos líquidos, no se debe usar la solución de mezcla suministrado en el paquete y se debe descartar

Vancomicina (en polvo) 1.000 mg y gentamicina (líquida) 240 mg **NO USAR LA SOLUCIÓN DE MEZCLA**



Vancomycin (Powder) 1000mg and Tobramycin (Liquid) 240mg **NO USAR LA SOLUCIÓN DE MEZCLA**

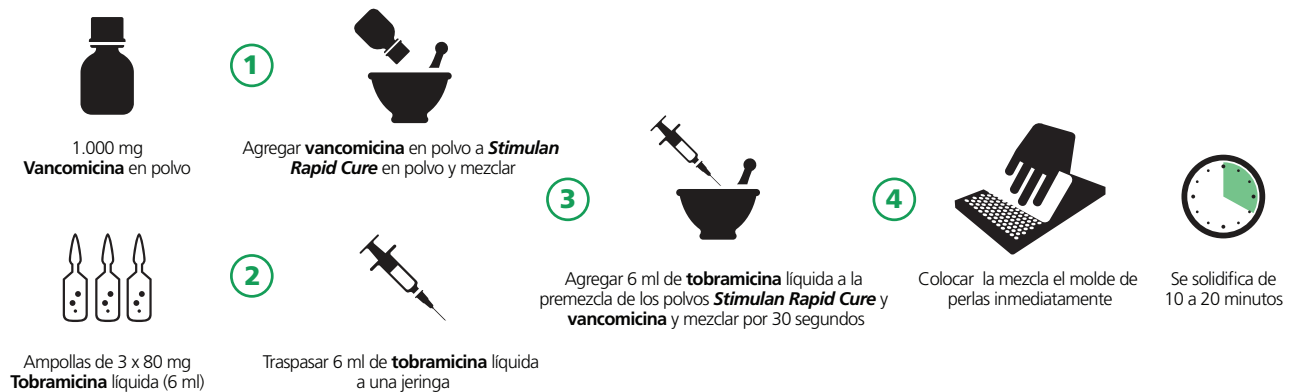

Rifampicina (en polvo) 600 mg y gentamicina (líquida) 240 mg **NO USAR LA SOLUCIÓN DE MEZCLA**

