

Blandningsriktlinjer för antibiotika per 10cc

Behandlande läkare är ansvarig för det slutgiltiga beslutet gällande mängd och typ av antibiotika

Antibiotika i pulverform

VARNING: blandningsvätskan i paketet skall användas.
Tillsätt ingen annan vätska

Vancomycin (Pulver) 1000mg



1000mg
Vancomycin-pulver

①



Tillsätt **Vancomycin**-pulver till **Stimulan Rapid Cure**-pulver och blanda

②



Tillsätt **Stimulan Rapid Cure**-blandningslösning och blanda i 30 sekunder

③



Applicera på kulmattan omedelbart



Stelnar inom
3 - 5 minuter

Antibiotika i pulverform med förlängd härdningstid

VARNING: Vissa antibiotika kan förlänga härdningstiden avsevärt.
Följande förmixteknik sörjer för en snabbare härdningstid

Tobramycin (Pulver) 1000mg



1000mg
Tobramycin-pulver

①



Tillsätt blandningslösningen till **Stimulan Rapid Cure**-pulver. Blanda i 40 sekunder

②



Tillsätt **Tobramycin**-pulver till **Stimulan Rapid Cure** och blanda i 30 sekunder

③



Applicera på kulmattan omedelbart



Stelnar inom
10 - 20 minuter

Daptomycin (Pulver) 1000mg **ANVÄND INTE MEDFÖLJANDE BLANDNINGSLÖSNING, ANVÄND STERIL SALTÖSNING FÖR INJICERING**



1000mg
Daptomycin-pulver

①



Tillsätt 6ml steril saltlösning till **Stimulan Rapid Cure**-pulver. Blanda i 40 sekunder

②



Tillsätt **Daptomycin**-pulver till **Stimulan Rapid Cure** och blanda i 30 sekunder

③



Applicera på kulmattan omedelbart



Stelnar inom
15 - 30 minuter

Antibiotika i vätskeform

VARNING: Vid användning av antibiotika i vätskeform skall den medföljande vätskan i förpackningen inte användas utan kasseras

Gentamicin (Vätska) 240mg **ANVÄND INTE MEDFÖLJANDE BLANDNINGSLÖSNING**



3 x 80mg ampuller
Gentamicin (vätska) (6ml)

①



Överför 6ml **Gentamicin** (vätska) till sprutan

②



Tillsätt 6ml **Gentamicin**-vätska till **Stimulan Rapid Cure**-pulver och blanda i 30 sekunder

③



Applicera på kulmattan omedelbart



Stelnar inom
3 - 5 minuter

Tobramycin (Vätska) 240mg **ANVÄND INTE MEDFÖLJANDE BLANDNINGSLÖSNING**



3 x 80mg ampuller
Tobramycin (vätska) (6ml)

①



Överför 6ml **Tobramycin** (vätska) till sprutan

②



Tillsätt 6ml **Tobramycin**-vätska till **Stimulan Rapid Cure** pulver och blanda i 30 sekunder

③



Applicera på kulmattan omedelbart



Stelnar inom
5 - 15 minuter


Blandningsriktlinjer för antibiotika per 10cc

Behandlande läkare är ansvarig för det slutgiltiga beslutet gällande mängd och typ av antibiotika


Kombination av antibiotika i pulver- och vätskeform

WARNING: Vid användning av antibiotika i vätskeform skall den medföljande vätskan i förpackningen inte användas utan kasseras


Vancomycin (Pulver) 1000mg och Gentamicin (Vätska) 240mg **ANVÄND INTE MEDFÖLJANDE BLANDNINGSLÖSNING**

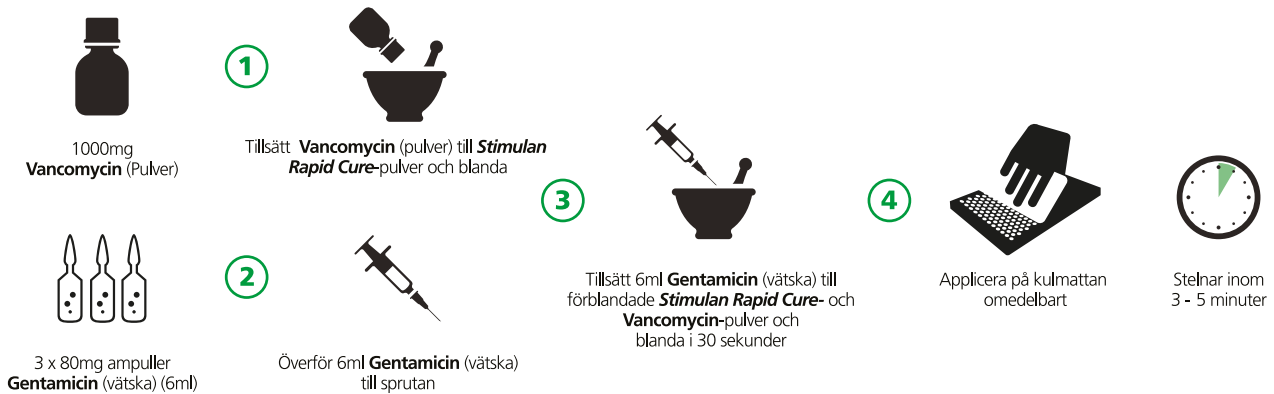

Vancomycin (Pulver) 1000mg och Tobramycin (Vätska) 240mg **ANVÄND INTE MEDFÖLJANDE BLANDNINGSLÖSNING**

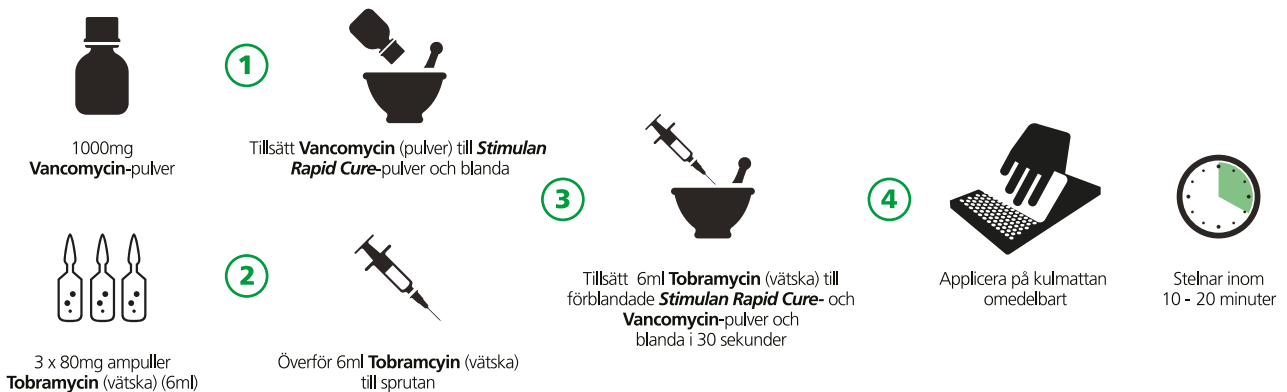

Rifampicin (Pulver) 600mg och Gentamicin (Vätska) 240mg **ANVÄND INTE MEDFÖLJANDE BLANDNINGSLÖSNING**

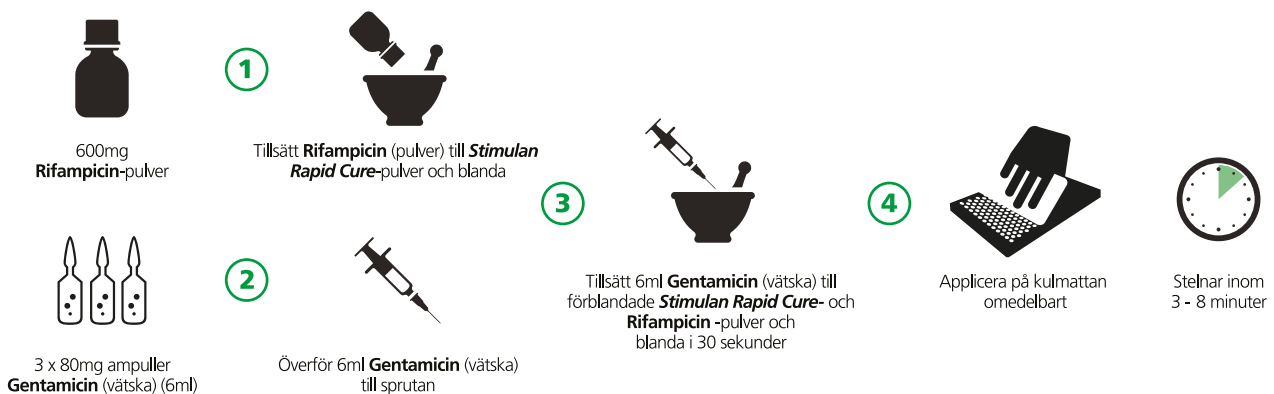

ENDAST FÖR DISTRIBUTION INOM EU. Alla tider är ungefärliga och kan variera beroende på tillverkare av använd antibiotika.

Keele Science Park, Keele, Staffordshire, England. ST5 5NL

Tel: +44 (0) 1782 338 580 Fax: +44 (0) 1782 338 599 Email: info@biocomposites.com www.biocomposites.com