

# STIMULAN®

## Flexibilité au cas par cas

Pouvant être utilisé en trois tailles de granules, en pâte ou en injection, les propriétés hydrophiles et les différents temps de prise rendent la préparation **STIMULAN** rapide et facile.

PRODUIT	VOLUME DE LA PÂTE	VOLUME DES GRANULES	TEMPS DE PRISE	CODES DE COMMANDE
STIMULAN <sup>Kit</sup> Pâte à injecter avec kit granules	5cc	10cc	Environ 8 minutes	600-005
	10cc	20cc		600-010
STIMULAN <sup>Rapid Cure</sup> Pâte à prise rapide avec kit granules	5cc	12cc	Environ 4 minutes	620-005
	10cc	25cc		620-010
	20cc	50cc		620-020

Notes personnelles

Pour les indications d'utilisation, les contre-indications, les mises en garde et les précautions d'utilisation, se référer aux instructions d'utilisation. Le médecin traitant a la responsabilité de déterminer le type et la quantité d'antibiotiques utilisés. L'utilisation concomitante d'antibiotiques administrés localement peut affecter le temps de prise.

Le mélange des antibiotiques avec STIMULAN Kit /STIMULAN Rapid Cure n'est pas une utilisation mentionnée sur l'étiquette du produit. Une telle utilisation pourrait encourir un risque professionnel pour le chirurgien/spécialiste santé.

Cette brochure pourrait inclure des informations sur l'utilisation du STIMULAN ou de techniques allant au-delà des permissions/validations accordées par les autorités compétentes. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour plus d'informations.

©2018, Biocomposites, STIMULAN, Bringing Calcium to Life et Power to Transform Outcomes sont des marques déposées et enregistrées du groupe Biocomposites Ltd. Tous droits réservés. La copie, la reproduction, la publication ou la réédition est interdite sans autorisation préalable de Biocomposites Ltd.

Brevets délivrés : GB2367552, EP 1204599 B1, US 6780391, EP 2594231 B1, US 8883063, CN ZL201210466117X, GB2496710, EP 3058899 B1  
Brevets en attente : GB1502655.2, US 15/040075, CN 201610089710.5, US 15/288328, GB1704688.9

**References:** **1.** Biocomposites, STIMULAN - Instructions for Use **2.** Biocomposites, Data on File, Mr Jogia **3.** Biocomposites, Data on File, Mr Sharma **4.** Biocomposites, Data on File, Mr Dharmarajan **5.** Cooper, J.J., Method of producing surgical grade calcium sulphate, 1999 **6.** McPherson, E.J., M.V. Dipane, and S.M. Sherif, Dissolvable Antibiotic Beads in Treatment of Periprosthetic Joint Infection and Revision Arthroplasty. The Use of Synthetic Pure Calcium Sulfate (Stimulan®) Impregnated with Vancomycin & Tobramycin. *Reconstructive Review*, 2013. 3(1): p. 32-43 **7.** Kallala, R., I. Nizam, and F.S. Haddad, Outcomes Following Use of Antibiotic-Eluting, Absorbable, Calcium Sulphate Beads in Revision Hip and Knee Surgery for Periprosthetic Infection., in 26th Annual congress of the international society for technology in arthroplasty. 2013: Palm Beach, Florida, USA **8.** Gauland, C., The use of antibiotic impregnated, implanted synthetic calcium sulphate tablets in the treatment of soft tissue, vancomycin resistant, enterococcus infections, in The Symposium on Advanced Wound Care and Wound Healing Society Annual Meeting. 2011: Gaylord Texan Hotel & Convention Center, Dallas, Texas.

# STIMULAN

POUVOIR DE TRANSFORMER LES RÉSULTATS



# STIMULAN®

Partenaire idéal pour la gestion des infections

STIMULAN est un sulfate de calcium totalement absorbable, conçu spécifiquement pour compléter vos stratégies de gestion d'espace vide et d'infection. <sup>1</sup>

- ✓ Approuvé pour un placement direct au coeur de l'infection
- ✓ Peut être mélangé avec des antibiotiques

*STIMULAN peut transformer les résultats des non-consolidations, des ostéites chroniques et des infections péri-prothétiques <sup>2-4</sup>*



TRANSFORME L'OSTEITE  
CHRONIQUE DE PIED DIABETIQUE <sup>2</sup>




TRANSFORME L'INFECTION  
TRAUMATIQUE <sup>3</sup>

Recristallisé pour une performance clinique améliorée

Seul STIMULAN est soumis à un procédé de recristallisation breveté qui apporte une performance fiable et cohérente. <sup>1, 5-8</sup>

- ✓ Profil d'élution prévisible
- ✓ Totalement absorbable à un taux optimal
- ✓ Peu d'écoulement
- ✓ N'endommage pas les surfaces articulaires

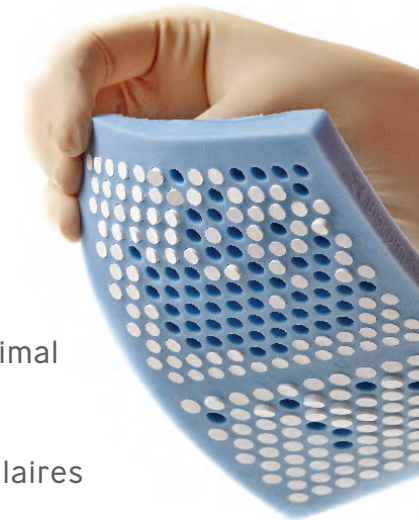

TRANSFORME LA REVISION DE  
PROTHESE INFECTEE <sup>4</sup>

Découvrez le vrai  
potentiel à  
**biocomposites.com**