

STIMULAN®

GUÍA DE PREPARACIÓN DE STIMULAN Rapid Cure

Solución de mezcla proporcionada

Debe utilizar la solución de mezcla que se proporciona en el kit. No añada ningún otro líquido.

1



Vacíe **STIMULAN** Rapid Cure en polvo en el recipiente de mezcla estéril provisto

2



Añada la solución de mezcla y mezcle cuidadosamente hasta obtener una pasta suave (aproximadamente 30 segundos)

3



Aplique la mezcla en el molde inmediatamente



Deje la pasta reposar por lo menos 8 minutos desde la mezcla. Doble el molde para sacar las perlas

Advertencia: el uso simultáneo de antibióticos suministrados localmente podría afectar al tiempo de fraguado como se demuestra a continuación en 10cc de **STIMULAN** Rapid Cure. La práctica de mezclado de antibióticos con el dispositivo **STIMULAN** Rapid Cure no ha sido evaluada por ninguna autoridad europea competente de medicamentos y está considerada como una indicación no autorizada conforme a las especificaciones del medicamento. Realizar esta práctica corre por cuenta y riesgo del cirujano / profesional sanitario.

Mezcla de antibióticos en polvo y líquidos.

Cuando se utilicen antibióticos líquidos, la solución de mezcla proporcionada en el kit no debe utilizarse.

Vancomicina* (en polvo) 1g y gentamicina* (líquida) 240mg

NO UTILICE LA SOLUCIÓN DE MEZCLA PROPORCIONADA




1g vancomicina en polvo

1



Añada vancomicina en polvo a **STIMULAN** Rapid Cure en polvo y prosiga con su mezclado

3

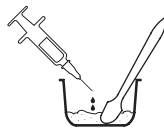

Añada los 6ml de gentamicina líquida a los polvos ya mezclados de **STIMULAN** Rapid Cure y vancomicina y mezcle durante 30 segundos

4



Aplique la mezcla en el molde inmediatamente



Tiempo de fraguado de 3 a 5 minutos



3 ampollas de 80mg de gentamicina líquida (6ml)

2



Introduzca 6ml de gentamicina líquida en una jeringuilla

Vancomicina* (en polvo) 1g y tobramicina* (líquida) 240mg

NO UTILICE LA SOLUCIÓN DE MEZCLA PROPORCIONADA




1g vancomicina en polvo

1



Añada vancomicina en polvo a **STIMULAN** Rapid Cure en polvo y prosiga con su mezclado

3

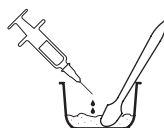

Añada los 6ml de tobramicina líquida a los polvos ya mezclados de **STIMULAN** Rapid Cure y vancomicina y mezcle durante 30 segundos

4



Aplique la mezcla en el molde inmediatamente



Tiempo de fraguado de 4 a 7 minutos



3 ampollas de 80mg de tobramicina líquida (6ml)

2



Introduzca 6ml de tobramicina líquida en una jeringuilla

Antibióticos en polvo

Debe utilizar la solución de mezcla que se proporciona en el kit. No añada ningún otro líquido.

Vancomicina * (en polvo) 1g



Antibióticos en polvo con tiempos de fraguado prolongados

Algunos antibióticos podrían prolongar el tiempo de fraguado de manera considerable. La siguiente técnica garantiza un tiempo de fraguado más rápido.

Tobramicina * (en polvo) 1.2g



Antibióticos líquidos

Cuando se usen antibióticos líquidos, la solución de mezcla proporcionada en el kit no debe utilizarse.

Gentamicina* (líquida) 240mg NO UTILIZE LA SOLUCIÓN DE MEZCLA PROPORCIONADA



Tobramicina* (líquida) 240mg NO UTILIZE LA SOLUCIÓN DE MEZCLA PROPORCIONADA



CE 0123

*Fuente: Hospira

Siga las indicaciones y consulte las contraindicaciones, advertencias y precauciones en las instrucciones de uso.

Es responsabilidad del especialista decidir el tipo y la cantidad de antibiótico empleado.

Este catálogo puede contener el uso de STIMULAN y/o técnicas que van más allá de la autorización / aprobación actual concedida por la autoridad reguladora competente. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local.

©2018, Biocomposites, STIMULAN, Bringing Calcium to Life, Power to Transform Outcomes y DRY26 son marcas / marcas registradas de Biocomposites Ltd. Todos los derechos reservados. No está permitida la copia, reproducción, distribución o reedición sin el permiso expreso y por escrito del propietario, Biocomposites Ltd.

Patentes concedidas: GB2367552, EP 1204599 B1, US 6780391, EP 2594231 B1, US 8883063, CN ZL201210466117.X, GB2496710, EP 3058899 B1
Patentes pendientes: GB1502655.2, US 15/040075, CN 201610089710.5, US 15/288328, GB1704688.9, EP 18275044.8, US 15/933936

MA0050R4 No está autorizada su distribución en EE.UU.