


ÅTERSTÄLLER UTAN ATT LÄMNA NÅGRA SPÅR EFTER SIG

HANDLEDNING FÖR PREPARERING

Det tar bara några omsorgsfulla minuter att preparera **geneX** och **geneX ds**. Använd endast den medföljande blandningslösningen. Tillsätt inga ytterligare substanser till massan.


geneX

1

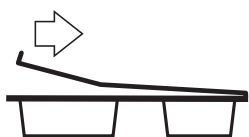


Öppna förpackningen och ta ut alla komponenter med aseptisk teknik

2

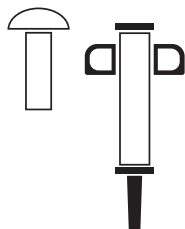

Avlägsna kolven från injektionssprutan och lägg den åt sidan

3

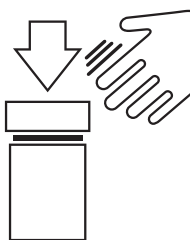

Knacka försiktigt på burken, ta av locket och töm pulvret i en steril blandningsskål

4




Tillsätt blandningslösningen till pulvret. Låt stå i en minut

5



Blanda ordentligt tills en massa formas (cirka 30 sekunder). Blanda inte för länge

6

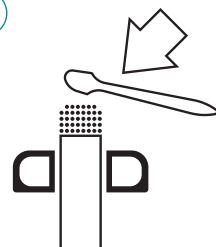

Använd en spatel för att trycka in massan i sprutan så snabbt som möjligt

7



geneX massan är nu klar att användas

8




geneX bengtraft är injicerbart upp till 5 minuter efter det att blandningslösningen har tillsatts. Låt härdna i minst 15 minuter och innan operationssåret försluts

RÅD TILL KIRURG

1. Börja blanda **geneX** först efter att operationsstället är redo.
2. Vid applicering med fingrarna kan **geneX**-pastan användas efter att steg 5 har utförts.
3. Rör inte **geneX**-pastan i såret under tiden som den härdar.


genex ds

1

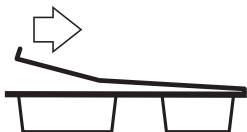


Öppna förpackningen och ta ut alla komponenter med aseptisk teknik

2

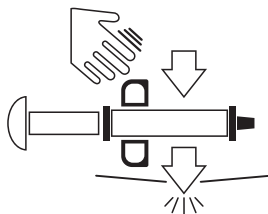


Håll pulversprutan horisontellt och knacka försiktigt på en hård yta innan du avlägsnar hatten

3

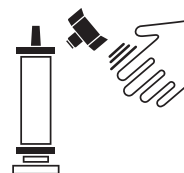


Håll vätskesprutan vertikalt och ta försiktigt av hatten

4

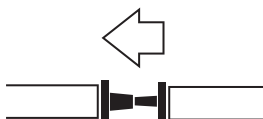


Skruva ihop sprutorna och injicera sedan **SNABBT** vätskan i pulversprutan. Upprätthåll tryck för att förhindra ett backflöde av vätska

5

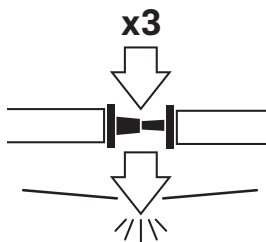

Upprätthåll tryck och knacka sprutorna tre gånger på ett hårt underlag. Vänd sprutorna och knacka dem tre gånger (och upprepa därefter)

6

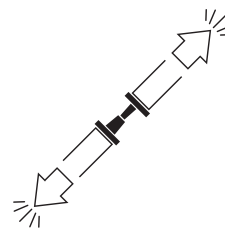


Skaka därefter sprutoran **KRAFTIGT** i 30 sekunder

7




För **FÖRSIKTIGT** över en liten mängd av blandningen från den större sprutan till den mindre

8

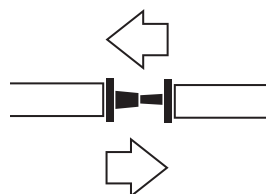


Arbeta kolvarna fram och tillbaka med allt större kraft tills en fullständig överföring till den mindre sprutan har skett. Utför ytterligare två överföringar mellan sprutorna för att se till att pastan blandas ordentligt

9

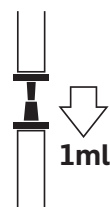

Överför blandningen till den större sprutan. Håll sprutan vertikalt och dra tillbaka kolven 1 ml. Knacka sprutan för att avlägsna pastan från sprutans hals

10

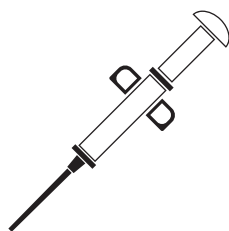

Koppla bort den lilla sprutan och kassera den. Skruva på förlängningsspetsen. **genex ds-pastan är nu klar att appliceras**

11



5 MIN

genex bensubstitut är injicerbart upp till 5 minuter efter det att blandningslösningen har tillsatts. Låt härda i minst 15 minuter och innan operationssåret försluts

Se bruksanvisningen för indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder.

© 2018. Biocomposites, genex och Power to Restore är varumärken/registrerade varumärken som tillhör Biocomposites Ltd.

Med ensamrätt. Kopiering, mångfaldigande, distribution och republicering är inte tillåten utan att skriftligt tillstånd först har inhämtats från ägaren, Biocomposites Ltd.

Beviljade patent: EP I390086 BI, US 8632796, CN ZL02809194.9, US 8496955.

MA0184R2